


# 09. TUKE Knochensäge

## TUKE Bone Saw






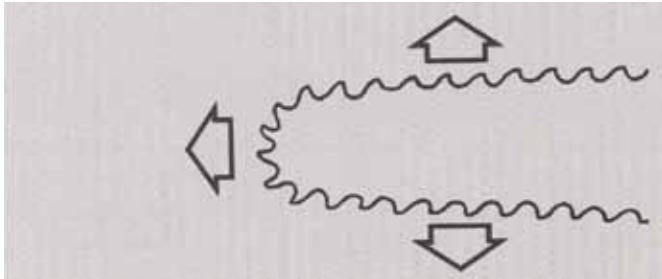


### Vielfältigkeit

- Sägeblätter in verschiedenen Größen und Formen erhältlich
- geeignet für das Durchtrennen von kortikalem oder spongiösem Knochen, das Herstellen von Hinterschneidungen, das Abrunden von Kanten und Ecken, das Arbeiten in engen Spalten oder das Anfrischen und Bearbeiten größerer Flächen am Knochen

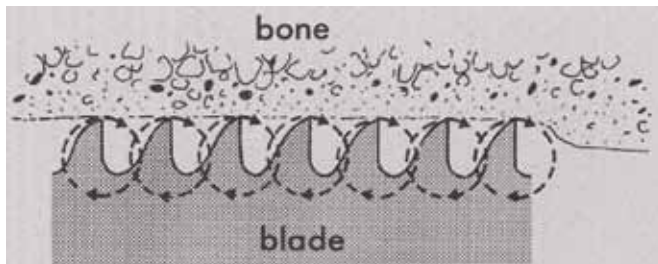


### Effizienz

- Schneiden graben sich vorwärts in den Knochen und ziehen sich auf dem Rückweg zurück
- Verbesserung der Spanabfuhr und Schneidwirkung
- durch minimale Schnittbreite weniger Hitze an der Knochenoberfläche

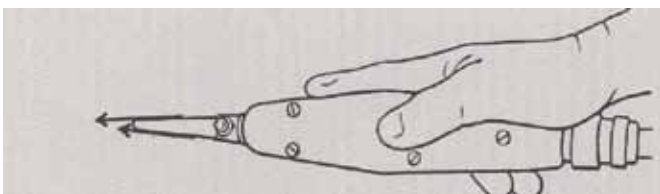

### Präzision

- Amplitude des Blattes beträgt nur 1,5 mm
- exakte Bestimmung des Schnittendes

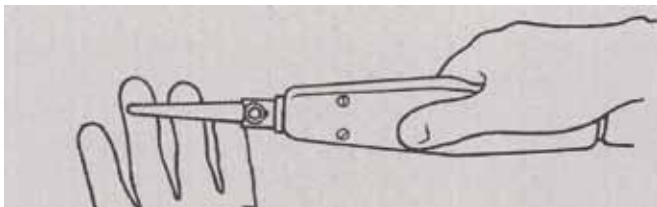

### Sicherheit

- Kreisbewegung mit Durchmesser von 1,5mm
- stufenlose, einstellbare Frequenz von bis zu 20.000 Zyklen pro Minute
- jedes Weiche schwingt mit ohne durchtrennt zu werden
- OP-Handschuhe sind geschützt - kein Risiko durch Schnitt in den Handschuh oder einer Verletzung

## Sägeblätter Saw Blades

	Art.Nr.	Beschr.	Blattstärke		Art.Nr.	Beschr.	Blattstärke
	258-001	Groß	0,831 mm				
	258-051		1,000 mm				
	258-002	Mittel I	0,831 mm		258-011	Bürste I	
	258-052		1,000 mm				
	258-003	Mittel II	0,813 mm		258-012	Bürste II	
	258-053		1,000 mm				
	258-004	Klein	0,610 mm		258-013	Lang	0,813 mm
	258-005	X-klein	0,457 mm		258-063		1,000 mm
	258-006	X-dünn	0,457 mm		258-074		1,200 mm
	258-007	Stichsäge	1,220 mm		258-014	X-Lang	0,813 mm
	258-008	Kortex groß	0,229 mm		258-064		1,000 mm
	258-009	Kortex klein	0,229 mm		258-075		1,200 mm
	258-010	Lochfräser			258-015	X-lang	0,813 mm
					258-065		verstärkt
					258-016	XX-Lang	0,813 mm
					258-066		schmal
					258-017	XX-Lang, breit	0,813 mm
					258-067		

9.14.210

**Standard Akku 9,6V**  
Standard rechargeable battery 9.6V



258.102

**Hex Spanner**  
Hex wrench



9.14.811

**Steriltrichter für Akkus**  
Funnel for inserting rechargeable battery



9.14.814

**Ladegerät, einfach 110V oder 240V - Ladezeit 60min**  
Desktop charger, mono 110V or 240V - charging time 60min







Alle Artikel können Sie mittels Formular bestellen. Senden Sie uns Ihre Bestellung per Fax an +49 (0)7704 60 61 oder an info@alumedica.com.

Bezeichnung/ Ausführung

Artikelnummer

Anzahl



Firma:

Ansprechpartner:


Kundennummer:  
(falls vorhanden)

PLZ/Ort:

Land:

Straße:

E-Mail:

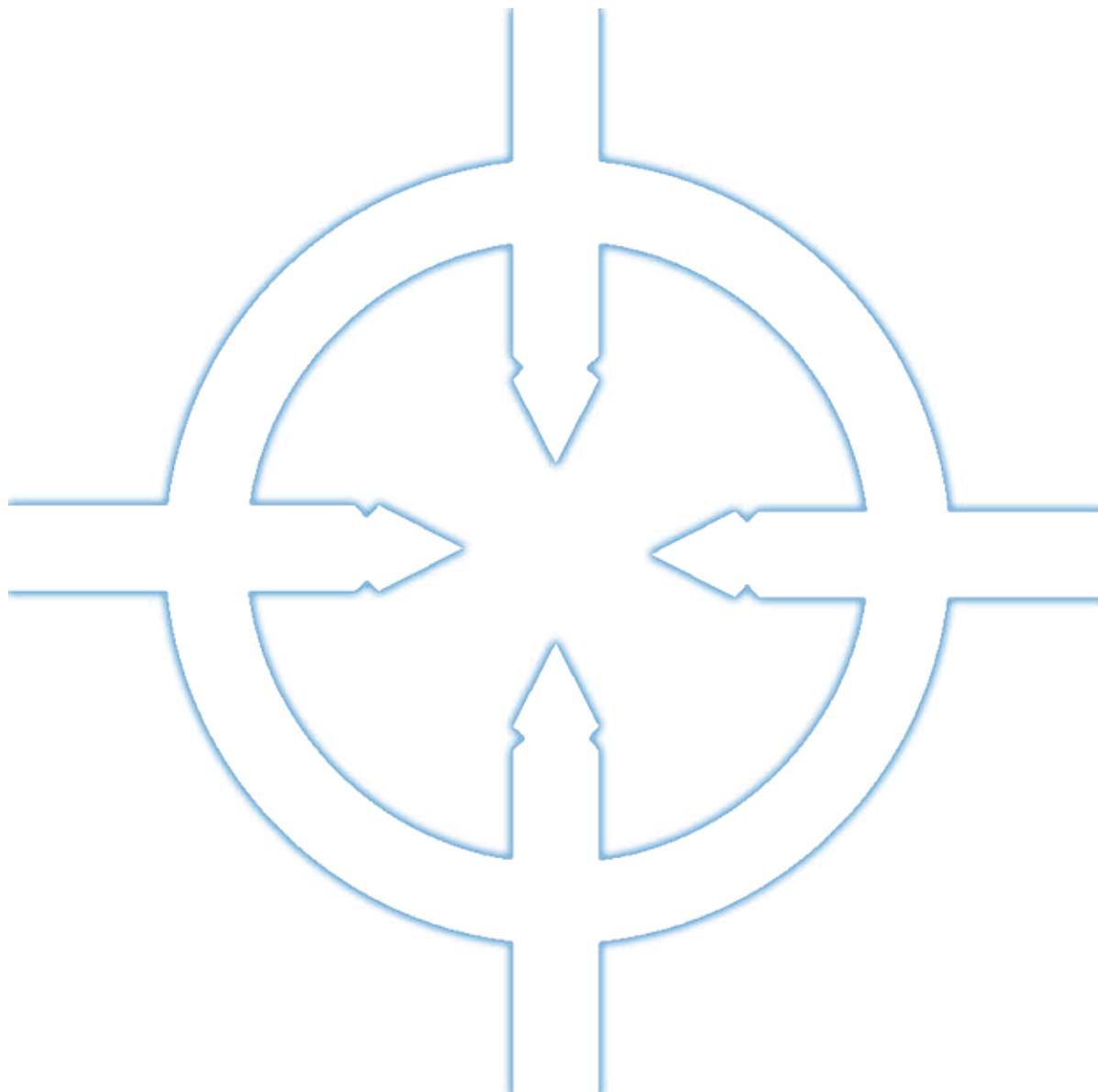

**Alumedica GmbH**

Schlemmersbrühlstraße 14  
D - 78187 Geisingen

fon +49 (0)7704 60 60

fax +49 (0)7704 60 61

[info@alumedica.com](mailto:info@alumedica.com)

[www.alumedica.com](http://www.alumedica.com)

Rev\_01  
2019-07-05